

## Post and Core




Refrigerate



Capillary™ Bosh Tip



Remove cap and collar. Dispense base and catalyst onto a pad to ensure evenness of flow.

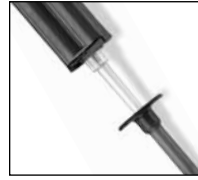

Load to restoration or back load to skin syringe for syringe/tip delivery.



**Lute:** Deliver mixed PermaFlo DC from SkinI syringe to depth of post preparation. Insert post(s).



**Bulk fill:** Deliver around post then build core.  
**Regular Set:** Working time 3-5 minutes. Complete set in 9-10 minutes.  
**Fast Set:** Working time 1.5-2 minutes. Complete set in 4 minutes.



Note: To control slumping light cure for 2-4 seconds as needed. Continue adding.

English

## Post and Core:

Etch 15 seconds.

Use disposable TriAway™ adapter with Endo-Eze® tip for water rising, and blowing out excess water from post preparation. Optional: Luer Vacuum adapter and tip.

German

## Stifte und Stümpfaufbauten:

15 Sek. anätzen.

TriAway™ -Einmaladapter mit Endo-Eze® Kanüle verwenden, zum Abspülen und Abblasen des überschüssigen Wassers aus der Stiftpreparation. Optional: Luer Saugadapter und Kanüle.

French

## Tenons et inlay-cores:

Mordancer 15 secondes.

Utiliser un adaptateur TriAway™ à usage unique avec l'embout Endo-Eze® approprié pour le rinçage et l'élimination des excès d'eau du logement radiaire. Optionnel : Utiliser un embout fixé sur l'adaptateur d'aspiration.

Dutch

## Stift en Opbouw:

Ets 15 seconden.

Gebruik geen disponibile TriAway™ adapter met Endo-Eze® tip om met water te spoelen en de stiftpreparatie uit te blazen. Optioneel: Luer Vacuum adapter en tip.

Italian

## Perni mancone:

Mordenzare 15 secondi.

Per lo sciacquo con l'acqua, e per soffiar via l'eccesso d'acqua dalla preparazione per il perno, si usi l'adattatore monouso TriAway™ fornito di punta Endo-Eze®, Opzionale: adattatore Luer per l'aspiratore sotto vuoto e punta.

Spanish

## Poste y Centro:

Grabe durante 15 segundos.

Utilice el adaptador desechable TriAway™ con la punta Endo-Eze® para enjuagar y soplar el exceso de agua que haya quedado en la preparación del poste. Opcional: Adaptador y punta Luer Vacuum.

Portuguese

## Post e Falso Coto:

Ataque ácido durante 15 segundos.

Usar adaptador descartável TriAway™ com ponta Endo-Eze® para lavar com água e para soprar o excesso de água da preparação. Opcional: Adaptador e ponta Luer Vacuum.

Swedish

## Stift och pelare:

Etsa 15 sekunder.

Använd engångs TriAway™ adapter med Endo-Eze® spets för vattenskylning och blås ut överflödigt vatten från stiftpreparation. Alternativ: Luer Vacuumadapter och tip.

Danish

## Stift og Opbygning:

Syreets 15 sekunder.

Brug engangsadapteren TriAway™ med en Endo-Eze® spids til skylning og til at blæse overskydende vand væk fra stiftpreparationen. Alternativ: Luer Vacuum adapter og spids.

Finnish

## Nastat ja pilaarit:

Etsaa 15 sekunnin ajan.

Käytä kertakäyttöistä TriAway™ adapteria yhdessä Endo-Eze® kärjen kanssa vesiuhutellun ja puhalla lika vesi pois nastautuksesta. Vaihtoehto: Luer vacuum -adapterit ja kärjet.

Greek

## Αναστάσεις με ενδοεζικούς έξωτες:

Αποκαταστήτε 15sec.

Χρησιμοποιήστε τον προσεγγίσιμο μετρήσιμο TriAway™ για έγχυση Endo-Eze® για επλήρωση με νερό και απομάκρυνση της περίσσεια του νερού από την παρασκευή για τον έξωτα. Προαιρετικά: Χρησιμοποιήστε προσεγγίσιμο Luer για έγχυση σε 4 min.

Verschlusskappe abnehmen.

**Bonding:**  
PermaFlo Primer A 10 Sek., dann B 10 Sek. auftragen. Mit Luft trocknen, mit dem TriAway-Adapter und Kanüle.

Dosieren und Mischen wie gewohnt. Füllen Sie in die Restauration oder – für Spritzenapplikation – füllen Sie eine Spritze von hinten.

**Befestigen:**  
Angemischtes PermaFlo aus der SkinI-Spritze in die Tiefe der Stiftpreparation einbringen. Stift(e) einsetzen.

**Aufbau:** Um Stiftpfopf herum applizieren, dann Stumpf formen.  
**Normalhärtend:** Verarbeitungszeit 3-5 Minuten. Vollständige Aushärtung in 9-10 Minuten.  
**Schnellhärtend:** Verarbeitungszeit 1,5-2 Minuten. Vollständige Aushärtung in 4 Minuten.

Beachten: Um das Verfließen zu verhindern, ggf. mit Licht 2-4 Sek. anhärten. Anschließend weiteres Material auftragen.

Enlever le capuchon et le collier. Appliquer une petite quantité de base et de catalyseur afin de s'assurer de leurs débâts identiques.

**Collage:**  
Appliquer le Primer A du PermaFlo DC pendant 10 secondes, puis le Primer B pendant 10 secondes. Sécher avec l'adaptateur TriAway et l'embout approprié.

**Scellement:**  
Appliquer le PermaFlo DC mélangé à l'aide de la seringue SkinI en profondeur au niveau du logement radiaire. Insérer le(s) tenon(s).

**Reconstitution:**  
Appliquer autour du tenon afin de reconstituer le pilier.  
**Prese normale:** Temps de travail: 3-5 minutes. Prise complete: 9-10 minutes.  
**Prese rapide:** temps de travail: 1,5-2 minutes. Prise complete: 4 minutes.

Note: Pour éviter l'affaissement du matériau sous son poids, photo-polymérisez à 2 à 4 secondes après chaque application.

Verwijder dop en kraag.

**Bondar:**  
Breng PermaFlo DC primer A aan, laat 10 sec. intrakken, vervolgens B 10 seconden, droog met TriAway adapter en tip.

Dispenseer een meng als gebruikelijk. Breng aan PermaFlo DC vanuit de SkinI spuit tot onder in de stiftpreparatie. Plaats stift(en).

**Vullen in bulk:** Breng aan rond de stift en vervaardig de opbouw.  
**Normale setting:** Verwerkingsstijd 3-5 minuten. Volledige verharding in 9-10 minuten.  
**Snelle setting:** Verwerkingsstijd 1,5-2 minuten. Volledige verharding in 4 minuten.

N.B.: Om weglopen te voorkomen kan indien gewenst kort, tot 4 sec., worden belicht. Vervolg het aanbrengen.

Togliere cappuccio e collare. Per garantirsi l'uniformità del flusso dispensare la base ed il catalizzatore sul blocchetto di miscelazione.

**Adesione:**  
Applicare PermaFlo DC Primer A 10 secondi, poi PermaFlo DC Primer B 10 secondi. Asciugare con aria usando l'adattatore TriAway ed una punta.

**Comentazione:**  
Applicare PermaFlo DC miscelato dalla siringa SkinI fino alla profondità della preparazione del perno (dal basso verso l'alto). Inserirre il perno.

**Riempimento in massa:** Applicare attorno al perno e costruire il moncone.  
**Prese Regular:** tempo di lavoro 3-5 minuti. Presa completa 9-10 minuti.  
**Prese Fast:** tempo di lavoro 1,5-2 minuti. Presa completa 4 minuti.

Note: Per controllare lo scormimento polimerizzare a punto per 2-4 secondi laddove necessario. Proseguire poi ad agglungere.

Remueva el tapón y la rosca catalizador en una superficie para mezclar, a fin de asegurarse que fluye uniformemente.

**Adhesión:**  
Aplique el Primer A durante 10 segundos y luego el Primer B, otros 10 segundos. Sequie con aire utilizando el adaptador y la punta TriAWay.

Dispénselo y mézclalo como de costumbre. Rellene la restauración o colóquelo en la jeringa para poder dispensarlo a través de la punta. (los) poste (s).

**Relleño:** Distribúyalo alrededor del poste e increméntalo cada parcialmente cada centro.  
**Fijado Regular:** Tiempo empleado: De 3 a 5 minutos. Fijado completo: 9-10 minutos.  
**Fijado Rápido:** tiempo empleado: Medio minuto a dos minutos. Fijado completo: 4 minutos.

Note: Para evitar el irregularidades durante el incremento, fotocure parcialmente cada 2-4 segundos, según se necesite. Continúe incrementando.

Remover a tampa e o fecho. Colocar base e catalizador no bloco de espátulação e assegurar a uniformidade da fluidez.

**Bonding:**  
Colocar na restauração ou utilizar a seringa para colocar o material. Misturar como sempre.

**Cimentar:**  
O PermaFlo DC é colocado com a seringa SkinI na profundidade da preparação para o post. Inserir o post.

**Re-enchimento do canal:** Distribuir à volta do post e depois re-encher.  
**Prese Normal:** Tempo de trabalho 3-5 minutos. Presa completa em 9-10 minutos.  
**Prese Rápida:** Tempo de trabalho 1,5-2 minutos. Presa completa em 4 minutos.

Note: Para controlar o escorrer do material, fotopolimeriza durante 2-4 minutos se necessário. Continuar adicionando.

Ta av hatt och krage. Applicera bas och katalysator på blandningsblock för att kontrollera jämnheten i flödet.

**Bonda:**  
Applicera PermaFlo DC Primer A 10 sekunder, därefter PermaFlo DC Primer B 10 sekunder. Lufttorika med TriAway adapter och tip.

Blanda och applicera som vanligt. Applicera på restauration eller fyll sprutan och applicera genom kanyl.

**Bulkytllning:** Applicera runt stiftet, bygg sedan upp pelaren.  
**Normalhärtande:** Arbetsstid 3-5 minuter. Totalt härtat på 9-10 minuter.  
**Srabbhärtande:** Arbetsstid 1,5-2 minuter. Totalt härtat på 4 minuter.

OBS: Ljushärdta 2-4 sekunder vid behov för att kontrollera konsistensen. Fortsätt att addera material.

Fjern prop og sikring. Kontrolér flow'et fra begge mundinger ved at trykke en lille mængde ud på en blok.

**Adhæsv:**  
Påfør permaFlo DC primer A 10 sekunder, derefter PermaFlo DC primer B 10 sekunder. Torblæs med TriAway adapter og spids.

Dispenser materiale og bland på blokken som vanligt. Læg materialet i restaureringen eller fild det blandede materiale i en engangs-sprøjte (bagtil, så luft uundgåes mellem stempel og materiale), så applicering kan ske præcist og kontrolleret med sprøjte og egnet spids.

**Volumentyldning:**  
Læg materiale omkring stiftet og byg derefter opbygningen op.  
**Normalhærdende:** Arbejdsstid 3-5 minutter. Fuld hærdning 9-10 minutter.  
**Hurtigt albhærdende:** Arbejdsstid 1,5-2 minutter. Fuld hærdning 4 minutter.

Bemærk: Placeringen af PermaFlo DC kan kontrolleres ved at belyse kortvarigt 2-4 sekunder, når der er behov for det. Fortsæt med applicering af materiale til opbygningen har ønsket størrelse/facon.

Poista korkki ja kaulus. Ammestele pieni määrä base:ä ja katalystiä lehtilölle varmistaksesi aineiden juoksevuu.

**Sidostus:**  
Aplikoí PermaFlo DC primer A 10 sekunnin ajan, sitten primer B 10 sekunnin ajan ja ilmakuuua TriAWay -adapterilla ja kärjellä.

Ammestele ja sekoita kuiten tavallisesti. Vie aine suoraan restauraatioon tai ammesteluunskuun.

**Bulk täyte:** Ammestele nastan ympärille ja rakenna sitten pilaari.  
**Regular set:** Työskentelyaika 3-5 minuuttia. Lopullinen kovettuminen 9-10 minuuttia.  
**Fast Set:** Työskentelyaika 1,5-2 minuuttia. Lopullinen kovettuminen 4 minuuttia.

Huomioitavaa: Valumisen estämiseksi valokuveta tarvittaessa 2-4 sekunnin ajan. Jatka ammustelemista.

## Συγκόλληση:

Τοποθετήστε το υλικό σε χαρτί απορρόφησης και συμπέτε το ως συνήθως. Επλήστε την αποκαταστάση ή γέμισε από πίσω τη σύριγγα SkinI στο βάθος της παρασκευής για τον έξωτα. Τοποθετήστε τον σπρέι/τη έγχυση για να γεμίσετε τον αποκαταστάση.

**Αρχική (προσωρινή) οργάνωση αποκατάστασης:** Τοποθετήστε PermaFlo DC γύρω από τους έξωτες και στη συνέχεια γέμισε την αποκατάση. Κανονική μήτη: Χρόνος έγχυσης: 3-5 min. Ολοκλήρωση της μήτης (πολυμερισμού) σε 9-10 min. Πλήρης μήτη: Ολοκλήρωση της μήτης σε 4 min.

Σημείωση: Για να ελέγξετε τη διαρροή (φέξιμο της επιρτής) φωτοπολυμερίστε για 2-4sec όπως χρειάζεται. Συνεχίστε την προεθώπη επιρτής.